


SAFARI JAGUAR P5H

5-delt briks – hydraulisk – Indstillelig i drænage



Længde:
205 cm

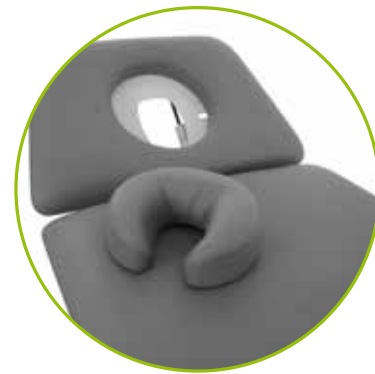

Højdejustering:
56-94 cm



Bredde:
69 cm





Vægt:
108/121 kg



Maks. belastning:
200 kg



Lagervare:
Ja

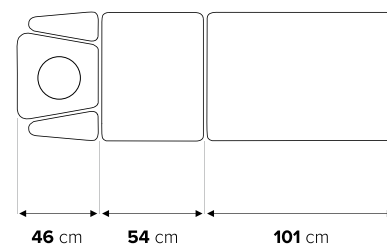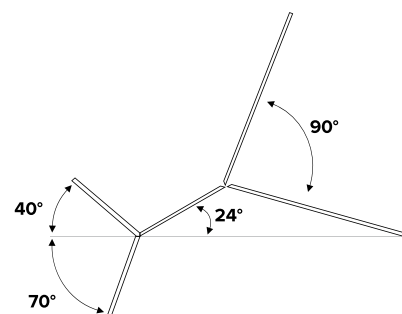

Specielt for Safari Jaguar P5 behandlings- og massagebriks

- 5-delt massage- og behandlingsbriks med indstilling til postural drænage
- Hovedsektion justerbar med gasfjeder fra -70° til +40°
- Rundt ansigtshul i hovedsektionen med aftagelig pude øger patientkomforten
- Roterbare, nedklappelige armstøtter i hovedsektionen
- Justerbar bensektion fra 0° til 90° med gasfjeder
- Dobbelt lag fyld med brandsikker, biokompatibel og ridsebestandig polstring i mange farver
- Pulverlakeret, meget stabilt saksestel i stål i moderne farver (hvid og grå)
- To sidebeslag til fastgørelse af mobiliseringsbælter og elastikbånd
- Håndtag til fastgørelse af bøjle/rem til traktion
- Pulverlakeret fodpedal i stål til højdejustering, tilgængelig fra begge sider af briksen
- Non-slip gummifødder med 1 cm højdejustering til nivellering af briksen

Yderligere valgmuligheder

- 80 cm bred briks